


胰島素注射筆使用方法 (修訂日期：2017 年 11 月 28 日)



1. 注射筆和筆帽

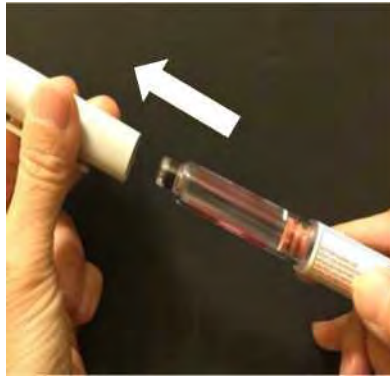

2. 移除筆帽



3. 撕去針頭的封蓋紙



4. 將針頭筆直套入注射筆的橡膠頭。旋緊。



5. 取出外針帽




6. 取出內針帽



7. 將劑量設定鈕轉至「2」



8. 針頭朝上，將按鈕按至盡頭

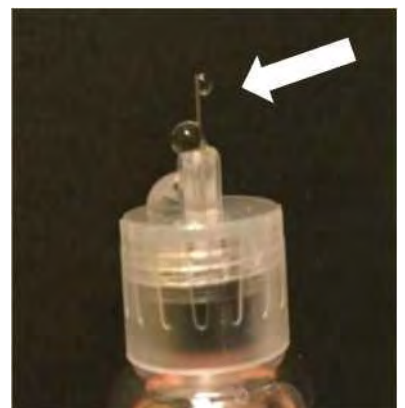


9. 針尖出現液滴，表示針頭已無氣泡 (可立即注射)



10.現在將劑量設定鈕轉至處方給您的劑量




11.將針頭刺入皮膚

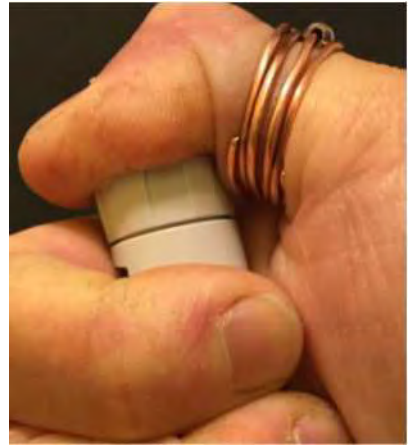

12.用拇指將按鈕按至盡頭。然後緩慢地數至 6



13.確保劑量設定鈕返回 0 的位置

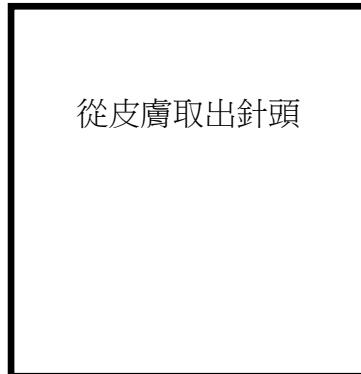

從皮膚取出針頭



14.只用外針帽蓋着針頭



15.將針頭從注射筆旋開




16.將針頭丟進銳器儲存箱內



17.將筆帽套回注射筆以供下次使用

其他重要事項

- 一盒內有 5 支注射筆
- 每支注射筆含有 300 單元的胰島素一支注射筆可用多久，由您注射的劑量決定
- 請將新注射筆存放在冰箱內
- 使用中的注射筆應放在室溫下（華氏 86 度以下），最多可放 1 個月
- 當注射筆沒有胰島素，您便無法轉動劑量設定鈕，筆管看去像這個樣子：

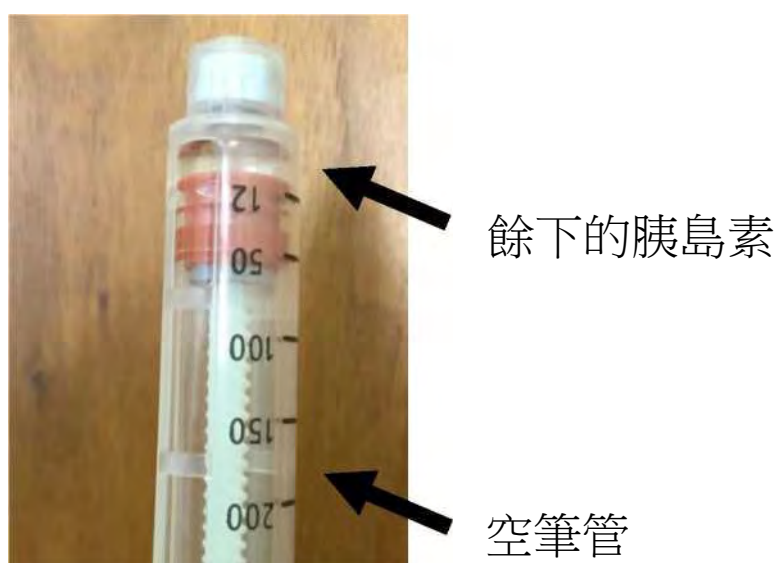

混合型胰島素特別注意事項：

- Novolog 70/30、Humalog 75/25 或 Humalog 50/50 是包含粉末和液體的混合型胰島素。
- 注射前，您必須輕輕地前後搖動注射筆，以便將胰島素混合。
- 混合後，胰島素便會轉為乳白色。
- 混合型胰島素注射筆可使用長達 10 至 14 天。