

Dispositivo con lancetas FastClix + Medidor Accu-chek Guide



Configuración:

Gire la tapa hacia el número que desea.

1 es para piel sensible
5 es para piel más dura
2, 3 y 4 son valores intermedios



1. Tire de la tapa para retirarla



2. Empuje el tambor hacia adentro (cada tambor tiene 6 lancetas)




3. Asegúrese de que el tambor se haya insertado completamente



4. Vuelva a colocar la tapa hasta que escuche un clic de inserción. Se pueden usar "6" nuevas lancetas



5. Retire una tira reactiva

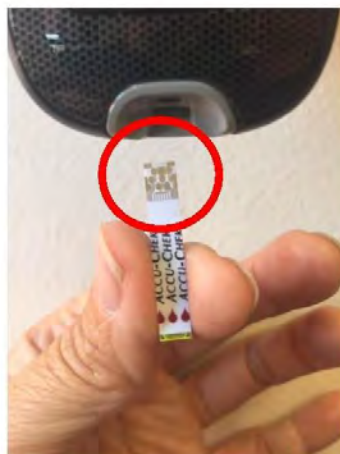

6. Asegúrese de que el lado dorado se inserte en el medidor



7. Inserte la tira reactiva. No es necesario presionar ningún botón.



7. Empuje la tira completamente hacia adentro. El medidor se encenderá automáticamente



8. Toque la punta del dispositivo de lancetas con el costado del dedo



9. Presione el botón (como una pluma) para pincharse el dedo



10. Apriete el dedo si necesita una gota más grande de sangre



11. Aplique la sangre en cualquier lugar del extremo amarillo de la tira reactiva



12. Después de obtener el resultado, tire de la prueba reactiva para apagar el medidor



13. Continúe con la siguiente lanceta moviendo la lengüeta blanca de adelante hacia atrás



14. El contador de lancetas se reducirá en un número. Cambie el tambor entero cuando llegue a "1"

Reemplace el tambor después de usar las 6 lancetas:



Retire la tapa



Extraiga el tambor de lancetas



Deseche el tambor usado en un contenedor para objetos punzantes



Otros recordatorios importantes

- Cada tambor de lancetas cuenta con 6 lancetas. Asegúrese de usarlas todas antes de retirar el tambor
- Antes de controlar el nivel de azúcar, lávese las manos con agua y jabón
- No comparta el dispositivo de lancetas con otras personas
- Cambie la batería cuando observe un símbolo de batería en la parte superior de la pantalla del medidor o un mensaje de error "E-9"
- Consulte la fecha de vencimiento en el envase de las tiras reactivas. No use tiras reactivas vencidas

