

Dispositivo con lancetas Softclix y medidor Guide



Configuración:
Gire la tapa hacia el número que desea.
1 es para piel sensible
5 es para piel más dura
2, 3 y 4 son valores intermedios



1. Quite la tapa



2. Inserte la lanceta, luego gire la tapa para quitarla



3. Alinee la marcas y reemplace la tapa



4. Oprima el botón de carga hasta el fondo (como una pluma retráctil)



5. Toque con el lado del dedo el extremo del dispositivo de lanceta




6. Presione el botón amarillo de liberación para pinchar su dedo




7. Oprima suavemente el dedo para sacar una gota de sangre




8. Retire una tira reactiva

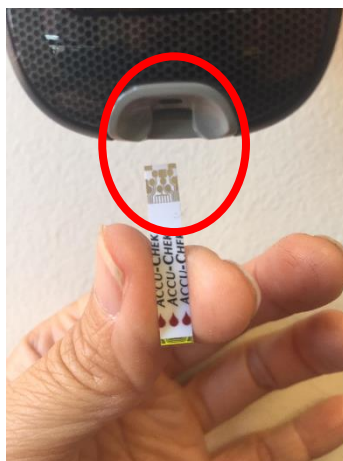


9. Asegúrese de que el lado dorado se inserte en el medidor

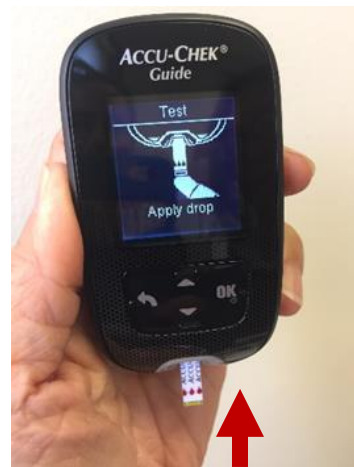

10. Empuje la tira completamente hacia adentro. El medidor se encenderá automáticamente

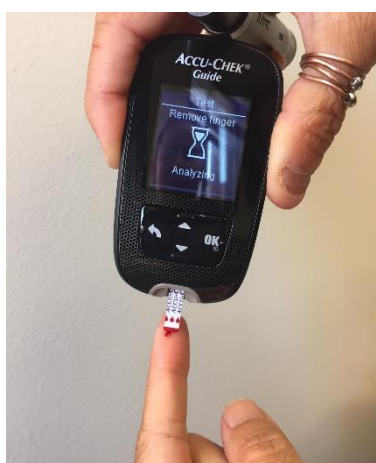

11. Aplique la sangre en cualquier lugar del extremo amarillo de la tira reactiva

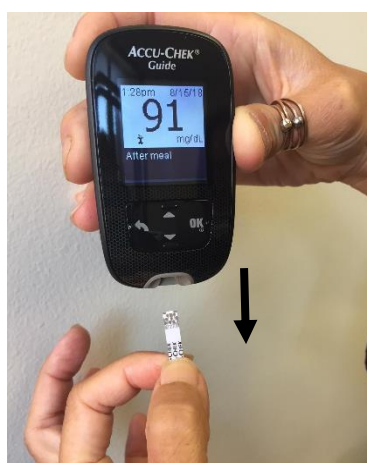

12. Lea su resultado de azúcar en la sangre. Saque la tira para apagar el medidor



13. Retire la tapa



14. Utilice el cuerpo del dispositivo de lanceta para desechar la lanceta en el contenedor especial para objetos punzantes

LISTO!